

YAMADA

## DIGITAL THERMOMETER

Model DMT-4336

64-2-2-2-0001650



## ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย

INTEND TO MEASURE THE HUMAN BODY TEMPERATURE.



ปลายหัวยืดหยุ่น



แสดงผลรวดเร็วใน 60 วินาที



กันน้ำ



แจ้งเตือน เมื่อมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.8°C (100°F)

บันทึกค่าได้ 1 ครั้ง  
MEM LAST READING RECALL

## เหมาะสำหรับ / SUITABLE FOR

- ใช้เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยได้ทั้งช่องปาก ทวารหนักและรักแร้
- INTEND TO MEASURE THE PARTIENTS BODY TEMPERATURE IN ORAL, RECTAL AND UNDERARM.

## วิธีการใช้ / HOW TO USE

- กดปุ่มเปิด/ปิด เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัล
  - วางปลายหัววัดไว้ตำแหน่งที่ต้องการวัด รอเสียงแจ้งเตือน
  - อ่านค่าวัดอุณหภูมิที่วัดได้
  - กดปุ่มเปิด/ปิด เทอร์โมมิเตอร์อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
- PRESS POWER SWITCH TO TURN ON UNIT.
  - POSITION SENSOR TIP. WAIT FOR BEEPER SOUND.
  - READ TEMPERATURE.
  - PRESS POWER SWITCH TO TURN OFF UNIT.

## คำเตือน / WARNING

- อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
  - ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกายหรืออาบน้ำ
- NOTICE THE WARNINGS ON THE LABEL AND ACCOMPANYING DOCUMENTS BEFORE USE. BODY TEMPERATURE SHOULD NOT BE MEASURED WITHIN 30 MINUTES AFTER EATING, EXERCISING OR BATHING.

บรรจุ 1 ชิ้น/กล่อง  
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 10 g

159.-/Pc

## คุณสมบัติ / FEATURE

ปลายหัวยืดหยุ่น	FLEXIBLE TIP
อ่านค่าได้เร็ว (60 วินาที)	FAST READ
การป้องกันน้ำมาตรฐาน IP27	IP27 WATERPROOF
ระบบปิดอัตโนมัติ	AUTO SHUT-OFF
เสียงแจ้งเตือน	ALARM SIGNAL
°C / °F สลับได้	°C / °F SWITCHABLE

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท สยามเอลดีวิลด์ จำกัด : 253/1038 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ : 02-016-6666

ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO13485

Joytech Healthcare Co., Ltd.



0197

# เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากอินฟราเรด

NON-CONTACT FOREHEAD INFRARED THERMOMETER

MODEL.  
**DT-8806**



รวดเร็ว แสดงผล  
ภายใน 0.5 วินาที  
FAST



เสียงแจ้งเตือนเมื่อ  
อุณหภูมิสูงเกินกำหนด  
FEVER ALARM



ปิดเครื่องอัตโนมัติ  
เมื่อไม่ใช้งาน 7 วินาที  
AUTO OFF



ค่าความคลาดเคลื่อน  
 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$   
VARIATION



ระยะการวัด  
1-10 cm  
CONVENIENT



เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิ  
CONVERTIBLE



บันทึกค่าการวัด  
ได้ 32 ครั้ง  
32 MEMORIES



เลือกโหมดการวัด  
อุณหภูมิร่างกาย/อุณหภูมิพื้นผิว  
BODY/SURFACE MODE SWITCH

**1,590.-/pc**



สะดวก รวดเร็ว  
เพียง 0.5 วินาที

0.5 SECOND FAST RESPONSE

## แบ่งเป็น 2 โหมดการใช้งาน

โหมดการวัดอุณหภูมิร่างกาย  
(BODY MODE)

ช่วงอุณหภูมิระหว่าง : **32-42.5°C**



อุณหภูมิร่างกาย  
BODY TEMPERATURE

โหมดการวัดอุณหภูมิพื้นผิว

อุณหภูมิน้ำ อุณหภูมินม อุณหภูมิอาหาร อุณหภูมิห้อง  
(SURFACE TEMPERATURE MODE)


ช่วงอุณหภูมิระหว่าง : **0-60°C**




← อุณหภูมินม  
MILK TEMPERATURE



อุณหภูมิอาหาร →  
FOOD TEMPERATURE

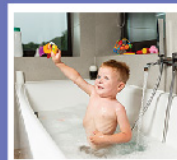

← อุณหภูมิน้ำ  
MEASURING  
WATER TEMPERATURE

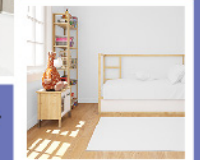

อุณหภูมิห้อง →  
MEASURE  
ROOM TEMPERATURE



# เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากอินฟราเรด

NON-CONTACT FOREHEAD INFRARED THERMOMETER

MODEL.  
**DT-8806**

หน้าจอแสดงผล LCD  
LED SCREEN

จอแสดงผลแบ็คไลท์ แสดงตัวเลขอุณหภูมิขนาดใหญ่ (8 mm.)  
มองเห็นในที่มืด



- โหมดปิดเสียง  
SILENT MODE
- วัดค่าง่ายเพียงกดครั้งเดียว  
ONE KEY MEASUREMENT
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน  
LOW BATTERY ALERT
- หน้าจอแสดงผล LCD  
LIQUID CRYSTAL DISPLAY

ฝาครอบแบตเตอรี่  
BATTERY HOLDER



โหมดวัดอุณหภูมิร่างกาย/  
อุณหภูมิพื้นผิว  
BODY/SURFACE MODE

เซ็นเซอร์อินฟราเรด

ปุ่มลง DOWN

ปุ่มขึ้น UP

โหมด MODE

ปุ่มกดวัดอุณหภูมิ  
OPERATION BUTTON

ลำโพง  
BUZZER

เสียงที่จะได้ยินออกจากลำโพง

เสียง "บีบ" ดัง 1 ครั้ง แสดงว่าได้ค่าตัวเลขอุณหภูมิแล้ว  
โดยจะแสดงที่หน้าจอ (สามารถเลือกเปิดหรือปิดเสียงได้)  
เสียง "บีบ" ดัง 5 ครั้ง ติดต่อกัน  
แสดงการแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้



## ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

ช่วงการวัดอุณหภูมิโหมดร่างกาย (RANGE IN BODY MODE)	32.0°C ~ 42.5°C (89.6°F ~ 108.5°F)
ช่วงการวัดอุณหภูมิโหมดพื้นผิว (RANGE IN SURFACE MODE)	0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
ความละเอียด (RESOLUTION)	0.1°C (0.1°F)
ค่าความคลาดเคลื่อน (VARIATION)	32 ~ 35.9°C (93.2 ~ 96.6°F) $\approx \pm 0.3^{\circ}\text{C}/\pm 0.5^{\circ}\text{F}$ 36 ~ 39°C (96.8 ~ 96.6 to 102.2°F) $\approx \pm 0.2^{\circ}\text{C}/\pm 0.4^{\circ}\text{F}$ 39 ~ 42.5°C (102.2 ~ 108.5°F) $\approx \pm 0.3^{\circ}\text{C}/\pm 0.5^{\circ}\text{F}$
ระยะการวัด (MEASURING DISTANCE)	1 - 10 cm
ระยะเวลาตอบสนอง (RESPONSE TIME)	0.5 วินาที
ขนาดสินค้า (DIMENSION)	131x82x35 mm
น้ำหนักสินค้า (WEIGHT)	103 g


## ข้อแนะนำ (SUGGESTION)

- ทำความสะอาดเครื่องด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70%
- เก็บเครื่องในที่แห้งและให้ห่างจากฝุ่นและแสงแดดโดยตรง
- CLEAN THE THERMOMETER WITH A COTTON BUD MOISTENED WITH 70% ALCOHOL.
- STORE THE THERMOMETER IN A DRY ENVIRONMENT, AND KEEP IT AWAY FROM DUST AND DIRECT SUNLIGHT.

## คำเตือน (WARNING)

- อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือการแพทย์ก่อนใช้งาน
- อย่าทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำยาซักล้างที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกายหรืออาบน้ำ

## การใช้งาน (How To Use)

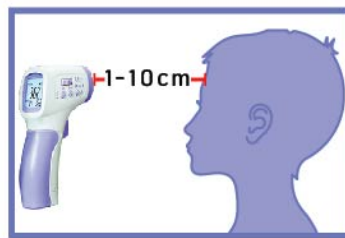

หรือ (OR)



เล็งไปที่หน้าผากจากระยะห่าง  
1-10 ซม. กดปุ่มวัดอุณหภูมิ  
อุณหภูมิจะปรากฏขึ้นภายใน  
0.5 วินาที ตรวจสอบให้แน่ใจ  
ว่าไม่มีเส้นผม เหงื่อ เครื่อง  
สำอาง ใส่หมวกปิดหน้าผาก  
หรือสามารถวัดอุณหภูมิที่  
ด้านหลังใบหูได้หากบน  
หน้าผากมีเหงื่อมาก

AIM TOWARDS THE FOREHEAD FROM A DISTANCE 1-10 CM.  
PRESS THE MEASURING KEY, THE TEMPERATURE IS DISPLAYED  
WITHIN 0.5 SEC. MAKING SURE THERE IS NO HAIR, PERSPIRATION,  
COSMETIC OR CAP COVERED ON THEIR FOREHEAD.  
YOU CAN TAKE THE TEMPERATURE BEHIND THE EARLOBE.



# เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส MODEL T01

NON CONTACT DIGITAL MEASURE INSTRUMENT

## แจ้งเตือนด้วยเสียงพูด

หลังวัดอุณหภูมิ



## แสดงผลได้รวดเร็วเพียง 1 วินาที



ใช้วัดอุณหภูมิ เพียงยื่นห่างจากเครื่อง 5-20 cm ไม่ต้องสัมผัสกับตัวเครื่อง



อุปกรณ์ภายในชุด

- ขาตั้ง
- อแดปเตอร์



**2,790.-/Set**


\*อุปกรณ์ไม่รวมแบตเตอรี่\*

### ข้อมูลทางเทคนิค

#### SPECIFICATION

ระยะการวัด	5-20 เซนติเมตร
ความเร็วการแสดงผล	1 วินาที
ช่วงอุณหภูมิการวัด	ร่างกาย 34°C - 42.9°C (93.2°F-109.2°F)
	วัตถุ 0°C - 100 °C (32°F-212.0°F)
ความคลาดเคลื่อนในการวัด	ร่างกาย ระหว่าง 35°C - 42°C, ±0.2°C (±0.2°C/0.4°F) นอกเหนือ 35°C - 42°C, ±0.3°C (±0.3°C/0.54°F)
	วัตถุ 0°C - 100°C (±1.0°C / 1.8°F)
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	0°C - 42°C (32°F-107.6°F) ความชื้น ≤ 85%
สภาพแวดล้อมการขนส่งและจัดเก็บ	-10°C - 50°C (14°F-122°F) ความชื้น ≤ 85%
แหล่งจ่ายไฟ	รองรับใช้สาย USB / แบตเตอรี่ BL-5C
บันทึกค่าการวัด	32 ครั้ง
ภาษา	13 ภาษา : ไทย, จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เกาหลี, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, โปรตุเกส, สเปน, เยอรมัน, อาหรับ, ฮิบรู
สีแสดงหน้าจอ	3 สี (สีเขียว, สีส้ม, สีแดง)
หน่วยแสดงผล	องศา °C / องศา °F
โหมดประหยัดพลังงาน	หากไม่มีการใช้งานใน 10 วินาที จะสลับเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ
ขอบเขต	รองรับการแสดงผลอุณหภูมิโดยรอบ
ขนาด	165x96x35 มม.
น้ำหนัก	163 กรัม

## หน้าจอแสดงสีตามช่วงอุณหภูมิ

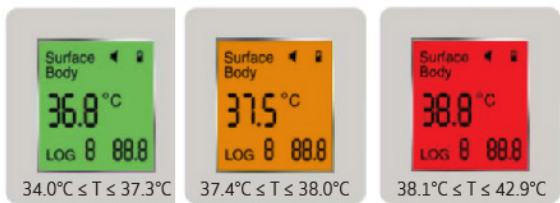

เมื่ออุณหภูมิอยู่ในช่วงที่กำหนด จะมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นทันที





# เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส MODEL T01

NON CONTACT DIGITAL MEASURE INSTRUMENT



## คุณสมบัติ

- หน้าจอแสดงผลแบบ LED
- โหมดการชาร์จด้วย USB
- ระยะเวลาการแสดงผลจากหน้าจอภายใน 1 วินาที

## คำเตือน

- อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
- ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกายหรืออาบน้ำ

## วิธีใช้

วัดหน้าผาก  
Forehead

